

「サリバチェッカー」購入申込方法

当所ホームページに記載の申込用Excelシートをダウンロードのうえ、kyosai@entre.gr.jpにお送りください。

郡山商工会議所 サリバチェッカー



▼ホームページはこちら



※お申込後、当所より事業所宛に請求書をメールでお送りします。
(ご入金後検査キット発注)
※発注後のキャンセルは承ることができませんのでご了承ください。

郡山商工会議所 生命共済

入院給付金付災害割増特約・
ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付定期保険(団体型)+
郡山商工会議所独自の給付制度(見舞金・祝金・弔慰金制度)

掛金

お一人様月額

15～60歳 1口加入の例
※お一人様3口までご加入いただけます。

1,800円

ポイント

- 業務上・業務外問わず
365日・24時間保障
- 短期入院も給付
- 生命共済加入で**お得な特典**



加入者特典

スパリゾートハワイアンズ入場券
優待販売

平日 3,570円～
土日 4,120円～

800円



東京ディズニーリゾート®・
コーポレートプログラム利用券

パークチケット代

2,000円 OFF

※配布時期等詳細については
当所ホームページにてご案内いたします。

健康増進サービス

健康診断受診料助成

加入者1名あたり

2,000円助成

※定員、請求方法等詳細については当所ホームページにてご案内いたします。

人間ドック受診料助成

加入者1名あたり

5,000円助成



※記載内容は生命共済制度の制度内容の一部を記載したものです。
ご加入にあたってはパンフレット、重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)を必ずご覧ください。

お問い合わせ

郡山商工会議所
総務部 共済係
TEL : 024-921-2637
MAIL : kyosai@entre.gr.jp



- *取扱店
アクサ生命保険株式会社 郡山営業所
TEL : 024-934-1285
- *定期保険(団体型)引受保険会社
アクサ生命保険株式会社
TEL : 03-6737-7777

当所生命共済(定期保険団体型)の加入を条件とした追加割引適用の可否確認のために、当所からアクサ生命に、申込書に記載の個人情報を開示し、アクサ生命から加入状況情報の提供を受けます。これについて、本申込書の提出を以て同意いただいたものとします。

郡山商工会議所からのお得なお知らせ

SalivaChecker®


サリバチェッカー

だ液を採取、ポストへ投函。 6 種のがんリスクを評価。 膵がんも早期ステージから

累計受検者数
11万人突破

医療機関導入
1,700以上

XTC JAPAN 2025
優勝

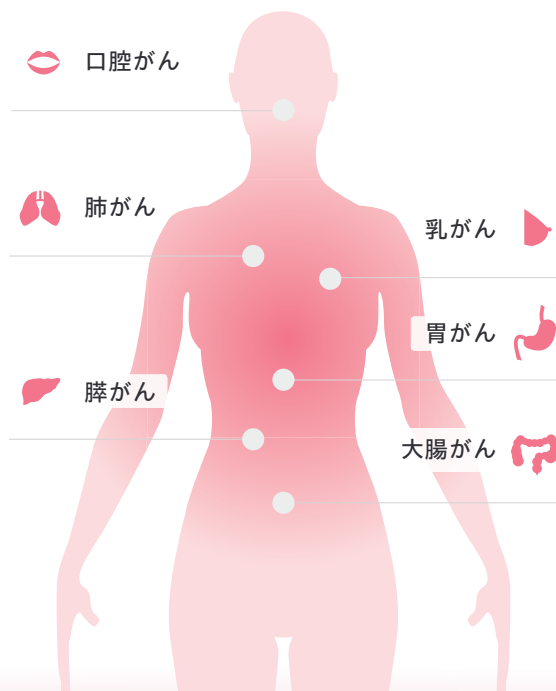

だ液を採取、ポストに投函 **かんたん 3** ステップ



だ液だけで手軽に検査

専用キットを使って簡単にだ液を採取。5分程度で終了します。
忙しい方でも手軽に検査を受けられます。

体への負担なく検査可能


少量のだ液を採取するだけなので、体への負担がありません。
血液検査など痛みが苦手な方でも安心して受けられます。

「今のリスク」が分かるレポート

遺伝子検査のような生涯的可能性ではなく「検査時点でのがんのリスク」についてグラフやチャートでレポートします。

がんは待ってくれない **がんの進行スピード例**


がんは進行すると成長が速くなるため、早期発見が極めて重要です。
そのため、生活習慣の改善や検診の活用を通じて、がん化するリスクがある段階から適切に管理することが大切です。

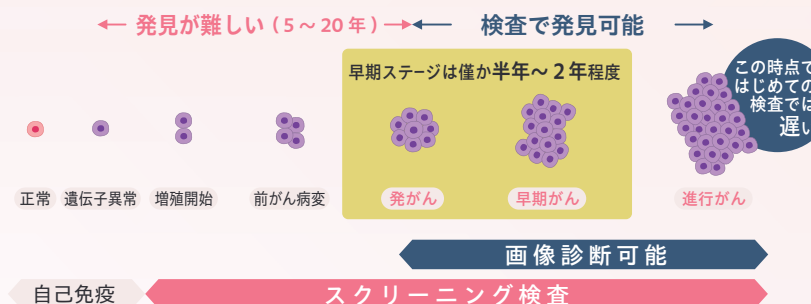

がんは**早期発見**が大切

SalivaChecker®

6 種のがんリスクを評価
膵がんも早期ステージから

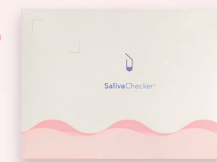

郡山商工会議所限定特別価格でのご案内

① 通常価格

公式サイトで
お申し込みの場合 **26,400** 円(税込)

② 商工会議所会員 特別価格

1名につき
特別価格 17,000 円(税込)

※従業員のご家族もご利用いただけます。

さらに
お得に!

③ 当所生命共済加入の場合

当所生命共済(定期保険団体型)に加入の方は
郡山商工会議所が負担することにより

14,000 円(税込)

でご提供いたします。




サリバチェッカー 検査の流れ

内 容 物



検査前日・当日の準備


前日
翌日のだ液採取までの12時間の間は、水以外の飲食、薬の服用はしないでください

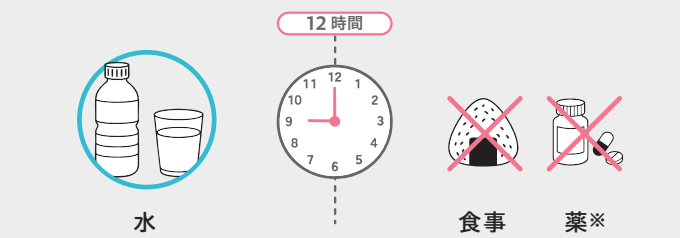

※ 採取前12時間の間に薬の服用が必要な方は、事前に医師等にご相談ください

検査手順

採取手順は動画でもご確認いただけます。

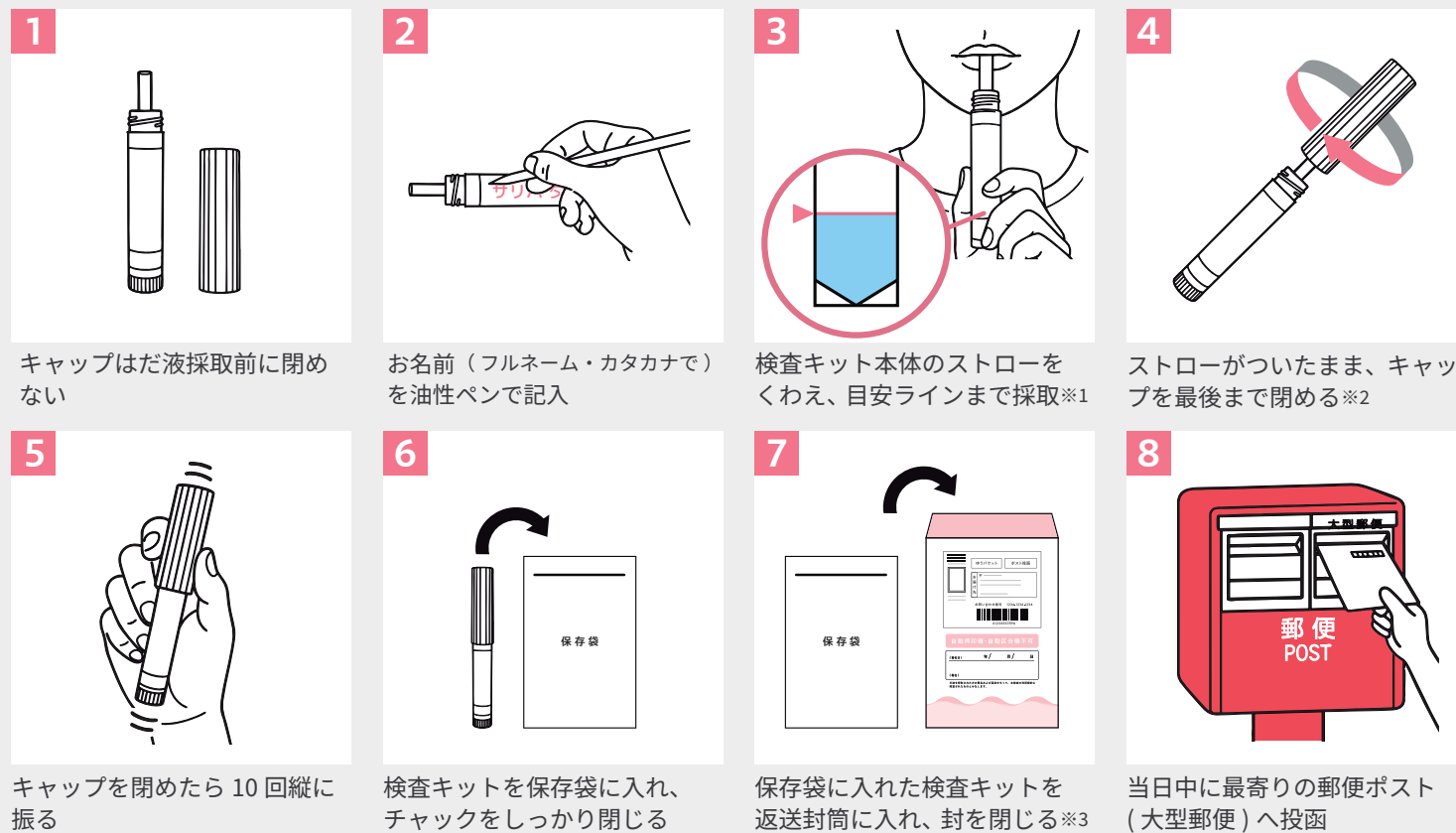


※1：だ液以外のものを入れない、だ液は少なくとも多くてもNG
※2：一度閉めたキャップは開けない
※3：封筒裏面のチェック項目を確かめ、封筒表面の署名欄に記入

サリバチェッカーはAI（学習モデル）を用い、測定だ液中の代謝物の特徴を解析

Q どうしてだ液からがんのリスクがわかるのか
A がんにかかると、だ液中の代謝物に変化するため

だ液は「身体の鏡」といわれ、血液や尿と同じように健康状態の指標となる多くの情報を含みます。これまでの研究から、がんに罹ることで、ポリアミンをはじめとただ液中に含まれる代謝物の特徴が変化することが分かっています。サリバチェッカーではAI（学習モデル）を用い、測定だ液中の代謝物の特徴が、がんの方とがんではない方のどちらに近いかを解析することで、がんのリスクを評価します。

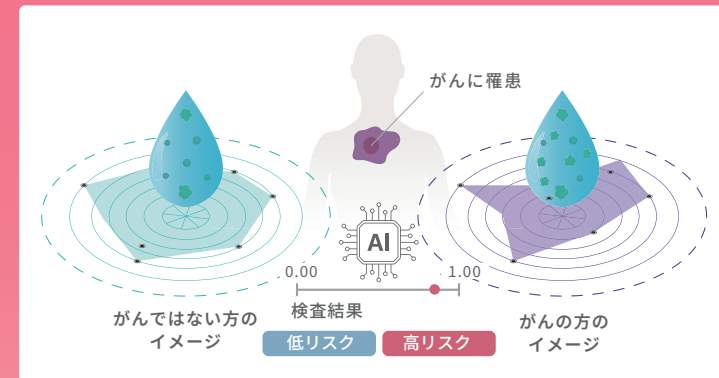


研究に裏打ちされた、確かな信頼を



慶應義塾大学先端生命科学研究所の研究と臨床データに基づき開発。消化器外科医の代表の想いと科学的根拠のあるリスク評価です。

おかげさまで、ご好評につき
商工会・商工会議所 様 全国へ展開中

お申し込み後の流れ

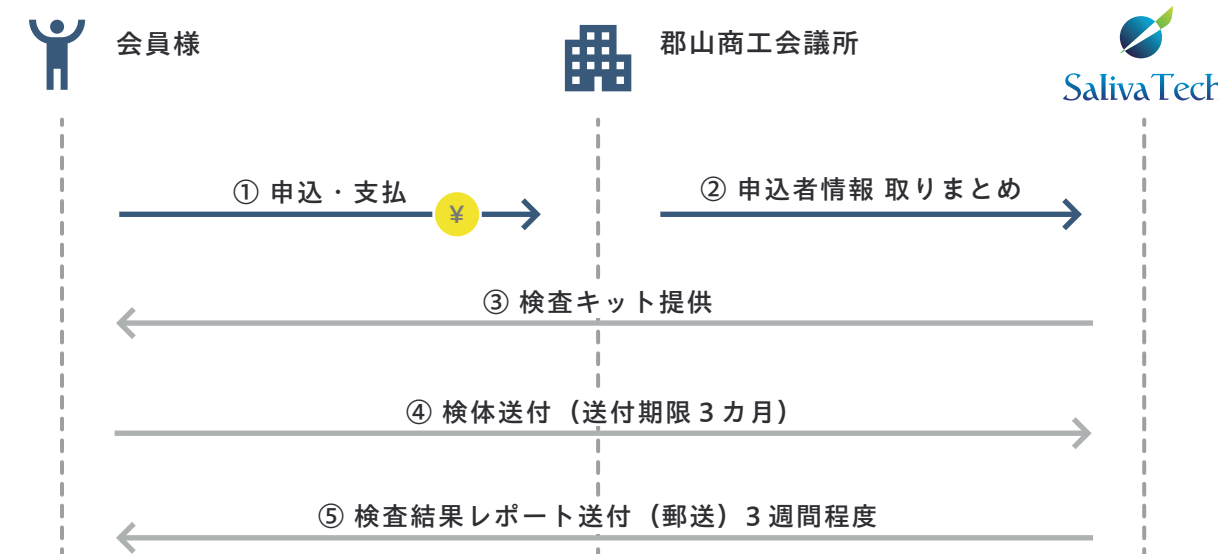

採取キット提出期限：キット発送から3ヶ月

※期限内にご提出いただけない場合は、検査結果をお返すことができません。

＜注意事項＞

- 本検査は遺伝子検査のように将来的な罹患リスクを調べるものではなく、今現在、がん罹患している可能性を調べる検査です。また、本検査により得られる情報は医師の診断に代わるものではありません。
- 本検査は次に当てはまる方はリスク評価結果が影響を受ける可能性があります。
 - 妊娠中・授乳中の方 ●発熱など炎症に伴う症状がある方 ●自己免疫性疾患（潰瘍性大腸炎・リウマチ等）を有する方
 - ドライマウス・シェーグレン症候群の方 ●検査前の注意事項を守っていない方
 - がん治療中（手術・抗がん剤治療・放射線治療）の方、その他疾患による手術を受けた方
- だ液採取前日から食事等の制限があります。
- 本検査結果のリスク評価結果にかかわらず身体に何らかの自覚症状がある場合は速やかに医療機関を受診ください。

検査キット開発元／検査・測定機関

SalivaTech 株式会社サリバテック 住所／山形県鶴岡市党岸寺字水上 246 番地 2

商品トラブル、不具合の場合

検査キットに瑕疵がある場合、弊社負担で交換を承ります。また、お客様都合による返品はお受けできません。

その他
注意事項

- 海外発送は行っておりません。●一部の離島はサービス対象外となります。●時間指定はできません。●弊社より発送前に限り、検査のキャンセルが可能です。サリバテックのホームページよりご連絡ください。●宅配ボックス完備のマンション・アパートにお住まいの際は、宅配ボックスにお届けさせて頂く場合がございます。予めご了承ください。

お問い合わせ

